
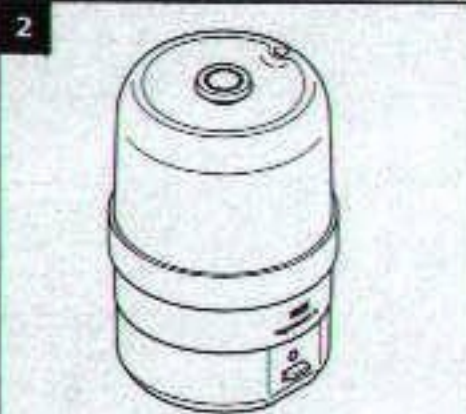

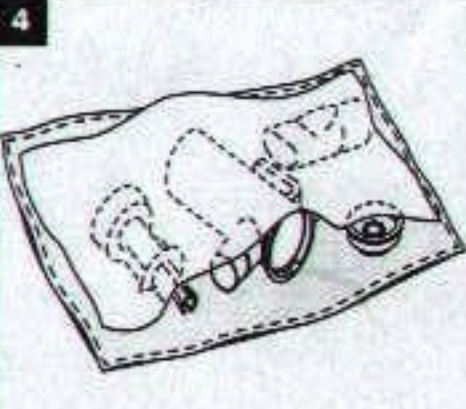
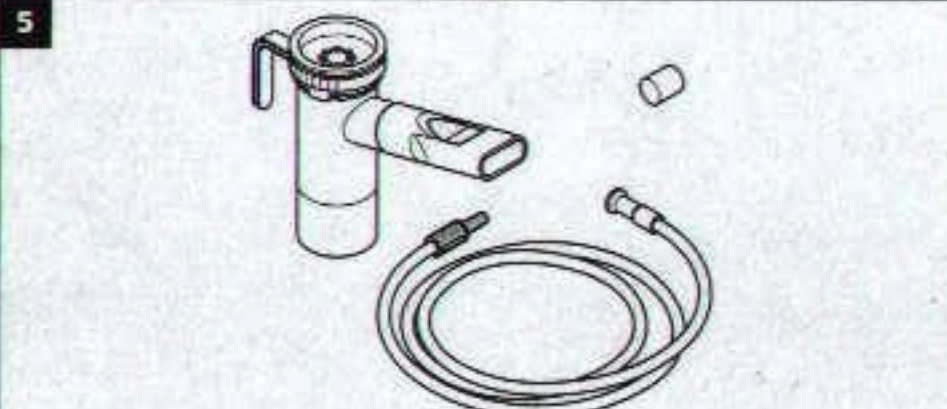


## Hygiëne en onderhoud

### Van de PARI LC PLUS en LC STAR vernevelaar - bij thuisgebruik

Wilt U na ieder gebruik als volgt te werk gaan:

		
<b>Reiniging</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vernevelaar in delen uiteen nemen.</li><li>• Alle delen met warm leidingwater en een beetje afwasmiddel reinigen.</li><li>• Alle delen onder stromend water afspoelen</li></ul>	<b>Desinfectie</b> <p>Aanbevolen methode: - Vaporisator van de firma NUK</p> <p>Alternatieve methode: - Desinfectie in een voldoende hoeveelheid kokend water (15 minuten)</p>	<b>Drogen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle losse delen op een droge, niet pluizende doek leggen (min. 4 uur). Voor het in elkaar zetten moeten alle delen volledig droog zijn. Droging eventueel met een fohn versnellen.</li></ul>
		
<b>Bewaren/opbergen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• De delen op een droge, stofvrije plaats, ingeslagen in een droge, niet pluizende doek, wegleggen.</li></ul>	<b>Onderhoud: minstens 1 x per jaar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luchtfilter, vernevelaar en luchtslang vervangen. (PARI YEAR PACK). Bij voorkomende verontreiniging of beschadiging eerder vervangen.</li></ul>	

Neemt U a.u.b. ook nog de gebruiksaanwijzingen van de PARI compressor en PARI vernevelaar goed door.

**XYTRON Medical**  
HOME CARE PRODUCTS

Apeldoorn Tel.: 055 - 5761588













ialisten in effectieve inhalatie



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • D-82319 Starnberg • Germany  
Tel.: +49 (81 51) 279-0 • Fax: +49 (81 51) 279-101  
e-mail: info@pari.de • www.pari.com • www.pari.de

## Inhaleren met de PARI LC PLUS en PARI LC STAR vernevelaar

 <p>Vóór iedere inhalatie de handen grondig wassen.</p>	 <p>Inademventiel van de vernevelaar afnemen.</p>	 <p>De vernevelaar met de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid medicament vullen.</p>	 <p>Inademventiel en mondstuk of masker op de vernevelaar zetten. <b>Attentie:</b> Bij gebruik van een masker (behalve PARI Smart Mask, PARI Babymasker) het inademventiel verwijderen.</p>
 <p>Bij gebruik van een Babymasker, het hoekstuk gebruiken en de positie van het masker aan de houding van het kind aanpassen.</p>	 <p>Het inhalatieapparaat aansluiten en inschakelen.</p>	 <p>Gaat U rechtop en ontspannen zitten.</p>	 <p>U kunt met de inhalatie beginnen zodra er een zichtbare en doorgaande medicamentennevel uit de vernevelaar komt.</p>
 <p>Het mondstuk tussen de tanden nemen en met de lippen omsluiten. Het masker dicht over de mond en neus plaatsen.</p>	 <p>Houdt de vernevelaar altijd rechtop, plaats het masker met lichte druk over de mond en neus.</p>	 <p>Langzaam en diep door het mondstuk of masker inademen en na een korte adempauze langzaam, volledig uitademen. Een verandering in geluid van de vernevelaar signaleert wanneer het medicament opgebruikt is.</p>	 <p>Luchtslang van de vernevelaar afnemen en de compressor nog enige minuten laten lopen om eventuele vochtigheid uit de slang te verwijderen.</p>